

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОДЛОЖКА ЗА МАСАЖ FOOTSY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Подложка за масаж
- Устройство за управление
- Ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: 2 x AAA батерии (не са включени)
- Честота: 1-100 Hz
- Размер: 32.5 x 29.5 cm
- Тегло: 57.4 гр



КОМПОНЕНТИ

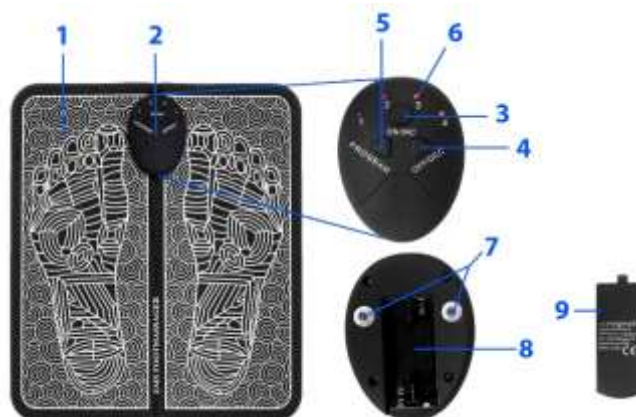

- (1) Подложка за масаж
- (2) Устройство за управление
- (3) Вкл/повишаване на интензивността
- (4) Изкл/понижаване на интензивността
- (5) Бутон за избор на режим
- (6) Индикаторна светлина за режим
- (7) Конектори
- (8) Отделение за батерии
- (9) Капак за отделението за батерии

ОТНОСНО

Електромагнитната стимулация (EMS) е начин за предизвикване на свиване в мускулите, използвайки електричество. Основно се използва при терапии за оздравяване на мускулите след контузия и при рехабилитация. Това подпомага за предотвратяване на атрофиране на мускулите, повишава кръвообращението и отпуска мускулите.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Внимание: Това не е медицинско устройство и е предназначено само за употреба у дома. Не е предназначено за заместител на устройство, което може да предостави физиотерапевт! Преди използване прочетете цялото ръководство за употреба!

○ ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ


- Устройството използва 2 AAA батерии за да работи.
- Отворете капака в задната част на уреда.
- Поставете батериите, като имате предвид тяхната полярност.
- Затворете капака.

○ УПОТРЕБА

- Поставете подложката за масаж на пода, така че да можете удобно да седнете, а краката ви да са поставени на отбелязаните зони върху подложката.
- Поставете устройството за управление на мястото му върху подложката. Върху подложката има два бутона, върху които трябва да можете да поставите устройството за управление.
- Поставете краката си боси върху отбелязаните зони на подложката. Устройството няма да работи ако носите чорапи.
- Натиснете и задръжте бутона за вкл. (3) за да включите устройството.
- Изберете режима на масаж чрез натискане на бутона "program". Има общо

6 режима, които варират от постоянен масаж до различни видове импулси. Изберете най-подходящия режим за вас. Преди да експериментирате с други режими, ние ви препоръчваме да изпробвате режим А за да свикнете с масажора.

- Индикаторните светлини показват режимите както следва:

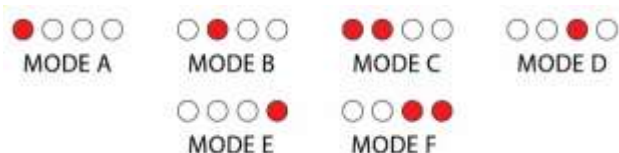

- След като изберете режим, натиснете бутона вкл. (3) за да започне терапията. Използвайте бутоните "INC"(3)/"DEC"(4) за да зададете желаната интензивност. Препоръчваме ви да започнете с ниска интензивност и да я повишавате, докато свикнете.
- Има 10 нива на интензивност. Те са посочени чрез това колко ярко свети индикаторната светлина. Ниска интензивност - затъмнена светлина; висока интензивност - ярка светлина.
- Масажорът работи 12 минути, което е и препоръчителното време за терапия. След това, той автоматично се изключва.
- Ако искате да изключите устройството преди да изтече това време, натиснете и задръжте бутона за изкл (4).

ВНИМАНИЕ

- Устройството никога не бива да се използва за облекчаване или намаляване на болките от не диагностицирани симптоми.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО АКО имате пейсмейкър или други медицински импланти, сте бременна, имате дълбока венозна тромбоза, високо кръвно налягане или проблеми със сърцето.
- Използването на устройството е препоръчително ако имате контузия или рана на краката и стъпалата.
- Използвайте устройството само според предназначението му.
- Използвайте устройството само за масаж на краката. Използването му върху друга част от тялото може да има опасни последици.
- Продуктът не е водоустойчив. Не го мийте и не го използвайте на места с висока влажност (баня).
- Дръжте далеч от деца и животни.
- Не разглобявайте. В случай на неизправност, върнете устройството в сервис.
- Съхранявайте уреда в оригиналната му кутия когато не се използва.
- Не позволявайте на устройството да влезе в контакт с метални предмети.
- Използвайте само предоставените с него аксесоари. Не променяйте уреда по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
---	---