

ДИГИТАЛЕН ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР INFRAHEALTH

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

КОМПОНЕНТИ


Дигитален инфрачервен термометър InfraHealth



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Метод на измерване: прецизно безконтактно измерване
- Дистанция за измерване: 3 – 5 см
- Захранване: DC 3.0V (2x AAA батерии – не са включени)
- Размер: 190 мм × 40 мм × 40 мм
- Тегло: 67 гр
- Автоматично изключване: след 15 секунди
- Стандартно отклонение:
 - 32° C – 34.9° C (± 0.3° C)
 - 35° C – 42° C (± 0.2° C)
 - 42.1° C – 42.5° C (± 0.3° C)

ДИСПЛЕЙ

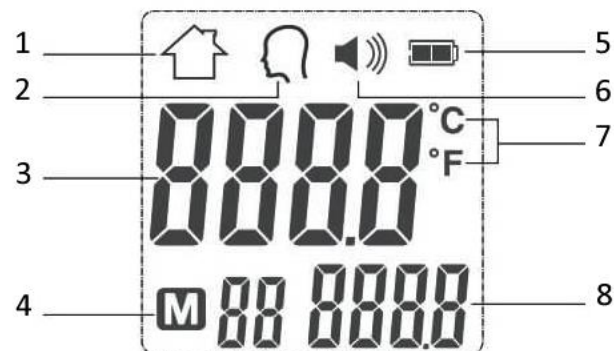

- 1 – Външна/Повърхностна температура
- 2 – Температура на тялото
- 3 – Дигитален прочит
- 4 – Индикатор за измерване
- 5 – Индикатор за батерия
- 6 – Звуков индикатор
- 7 – Температура °C/° F
- 8 – Измерена и съхранена температура

ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕРВАНЕ

Дигиталния инфрачервен термометър Infrahealth предлага прецизно измерване на температурата на тялото и на предметите.

Работи с две AAA батерии (не са включени). Поставете ги в отделението за батерии на гърба на продукта.

Температурата на тялото се измерва чрез насочване на термометъра към челото на разстояние 3-5 сантиметра и задържане на бутона SCAN.

Всяка измерена температура се запазва автоматично. Натиснете бутона + или – за да прегледате предходните измерени температури.

Натиснете бутона MODE за да преминете между режим измерване на температура на предмет и измерване на температура на тяло.

Термометъра има настройки по подразбиране. Нижете да ги промените като използване менюто function (функции):

Функция (Function) F1 – променя скалата за измерване: за да промените скалата, задръжте бутона MODE за две секунди. Когато се появи F1, натиснете + за скала по целзий и – за скала Фаренхайт.

Функция (Function) F2 – предупреждение за температура: настройката по подразбиране е зададена за предупреждение при 38 °C. За да промените тази стойност, натиснете бутона MODE за две секунди. Когато се появи F1, натиснете отново MODE. Когато се появи F2 можете да промените предупреждението за температура чрез бутоните + и -.

Функция (Function) F3 – Компенсирание на температура: Ако измерването се разминава от други устройства за измерване, тази температура може да бъде настроена. Използвайки същата процедура, включете функцията F3 и използвайте бутоните + и – за да настроите правилната стойност в рамките на -3 °C до 3 °C.

Функция (Function) F4 - Заглуши/активирай звук.

ВАЖНО

- Преди употреба се уверете, че сензора е чист
- Ако искате да използвате термометъра за различни температури на въздуха (вътрешна и външна), температурните разлики са големи, така че трябва да изчакате около 30 минути след всяка смяна на обстановката
- Ако измервате висока температура на предмет, изчакайте 30 минути преди да измерите телесна температура
- Не измервайте температура след душ, отмора и потене, след прилагане на козметични продукти и т.н., за да осигурите правилно измерване.
- Измервайте температурата поне 30 минути след хранене, душ или тренировка.
- Не използвайте този продукт в близост до вода или запалими субстанции, с мокри ръце или в контакт с вода
- Почистете устройството със суха кърпа
- Не използвайте надраскващи продукти за почистване
- Не потапяйте в течности
- Ако не използвате устройството за по-дълъг период от време Ви съветваме да махнете батерията
- Съхранявайте на сухо място без прах
- Моля изпълнявайте законовите разпоредби свързани с Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
---	--

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. За да подадете гаранционно искане, моля изпратете ни номера и датата на поръчката.