

NÁVOD K POUŽITÍ

MÁSÁŽNÍ PISTOLE WORKIT

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- masážní pistole,
- nabíječka,
- 4 masážní hlavice,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 110–240 V DC 50/60 Hz,
- kapacita baterie: 2000 mAh,
- provozní doba: 2–3 hod,
- materiál: ABS, silikon,
- hmotnost: 1,5 kg.



POPIS



1. kontrolky intenzity
2. tlačítko ON/OFF
3. nabíjecí port
4. masážní hlavice na páteř
5. masážní hlavice na velké skupiny svalů
6. masážní hlavice na základní masáž
7. masážní hlavice na klouby

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

- Masážní pistoli nabijeme, připojíme-li přiložený nabíjecí kabel do elektrické zásuvky a nabíjecího portu na zařízení (3).
- Během nabíjení svítí na nabíječce červená kontrolka.

- Před prvním použitím přístroj nabíjíme alespoň 3 hodiny.
- Po plném nabití pistoli odpojíme z nabíječky.

OVLÁDÁNÍ

Masážní pistole je určena k relaxaci svalů po cvičení či uvolnění bolesti způsobené křečemi a únavou.

- Masážní pistoli zapneme tlačítkem ON/OFF (2).
- Pistole se nejprve spustí na prvním stupni intenzity. Pistole disponuje 6 stupni intenzity: stupeň 1 (2100 rpm), stupeň 2 (2400 rpm), stupeň 3 (2700 rpm), stupeň 4 (3000 rpm), stupeň 5 (3300 rpm), stupeň 6 (3600 rpm).
- Stupně intenzity postupně měníme mačkáním tlačítka ON/OFF. Po dosažení 6. stupně a opětovném zmáčknutí tlačítka ON/OFF se zařízení vypne.
- Kontrolky v zadní části přístroje indikují intenzitu procedury.
- Jakmile si zvykne na ovládání přístroje, zkusíme zvýšit intenzitu a vybereme si nastavení, které nám nejvíce vyhovuje.
- Výměna masážní hlavice je snadná: hlavici vytáhneme z přístroje a nasadíme jinou.
- Jednotlivé masážní hlavice jsou určeny na různé části těla.
- Masážní hlavice tvaru U (4) je určena k masáži páteře a oblasti krku.

- Velká kulatá hlavice z pěny (5) je určena k masáži velkých skupin svalů.
- S malou placatou hlavicí (6) se provádí základní masáž všech svalů.
- Malá oblá hlavice (7) slouží k masírování kloubů.
- Nejlepších výsledků dosáhneme masáží po 20 až 30 sekundových dávkách s přestávkami až třikrát za proceduru. Masáž provádíme směrem dolů.


- Nenabíjíme-li přístroj, vyjmeme nabíječku ze zásuvky.
- Zařízení nepoužíváme, jsme-li zraněni nebo máme jiné zdravotní potíže.
- Z důvodu možnosti zranění nepoužíváme výrobek alespoň 90 dní po jakékoli operaci. Další použití zkonzultujeme s lékařem.
- Pocítíme-li bolest či nepříjemný pocit, okamžitě přestaneme přístroj používat.
- Aplikujeme pouze na svaly. Z důvodu možnosti zranění nepoužíváme na prstech, kostech, hlavě ani obličejí.
- Otvor na zadní straně nepřekrýváme, mohlo by dojít k přehřátí zařízení.
- Výskyt slabého pohmoždění je po aplikaci normální. Přístroj nepoužíváme, objeví-li se vážnější pohmoždění, bolest či jakékoli nepohodlí.
- Neaplikujeme v oblastech s malou či žádnou svalovou tkání.

ÚDRŽBA

- Po každém použití otřeme masážní hlavici vlhkým hadrem.
- Přístroj čistíme vlhkým hadrem či utěrkou, potom ho otřeme do sucha čistým suchým hadrem. Ujistíme se, že se dovnitř zařízení nedostala voda.
- Po použití zařízení vypneme.
- Výrobek nepřetržitě nepoužíváme déle než jednu hodinu.
- Skladujeme v originální krabici.
- Udržujeme mimo dosah vody a zdrojů tepla.

UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič by neměly používat děti a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.
- Výrobek nedemontujeme ani jakýmkoli způsobem neupravujeme.

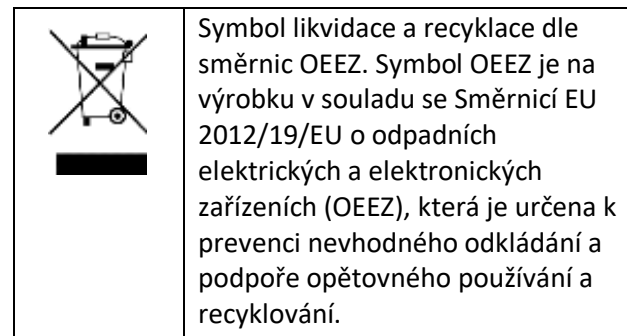

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

