

## NÁVOD K POUŽITÍ

### LASEROVÝ ODSTRAŇOVAČ CHLUPŮ

#### ČÁSTI VÝROBKU

Epilátor s víčkem

Sensa-Light hlavice

Microfoil hlavice

Čisticí šteteček

Nabíjecí kabel



#### PÓPIS

Sensa-Light hlavice:

- s touto hlavicí začne zařízení pracovat po kontaktu s kůží,
- přístroj vedeme pod úhlem 45° a hlavicí šetrně pohybujeme podél kůže proti směru růstu chlupů,
- upozornění: zařízení **NEPOUŽÍVÁME** pod úhlem 90° / rovně nahoru dolů,
- upozornění: abychom předešli poškození pokožky či hlavice, během provozu nevytváříme příliš velký tlak; v případě výskytu podráždění pokožky přeručíme činnost.



Microfoil hlavice:


- používáme na krátké chlupy,
- na rozdíl od Sensa-Light hlavice lepšího výsledku dosáhneme aplikací zařízení pod úhlem 90° nahoru a dolů a lehkým tlakem.

Před prvním použitím zařízení nabijeme. Přístroj zapneme přeprnutím tlačítka DOPRAVA (dle níže uvedeného obrázku), vypneme přeprnutím tlačítka DOLEVA.




#### VÝMĚNA HLAVIC

Hlavice vyměníme tak, že na zadní stranu hlavice momentálně vložené v přístroji přiložíme palce a mírným tlakem ji opatrně vysuneme ven (směrem nahoru dle šipek na obrázku).

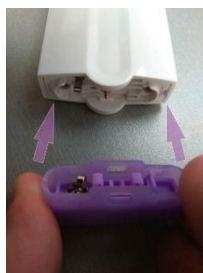

Novou hlavicí nejprve správně nasměrujeme, vložíme do přístroje a přitiskneme, až cvakne.

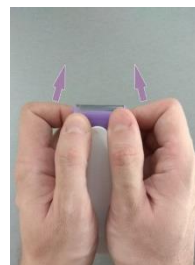

#### PROVOZ A ÚDRŽBA

- Zařízení nepoužíváme ve sprše, v blízkosti vody, ani na vlhkém místě.
- Hlavici neoplachujeme vodou, vyčistíme ji štetečkem za vypnutého zařízení.
- Skladujeme na suchém místě.
- Pro lepší výkon zařízení nepoužíváme během nabíjení.
- Hlavici můžeme promazat jednou či dvěma kapkami minerálního nebo dětského oleje.

#### NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijeme. Nabíjení trvá přibližně 2,5 hodiny.

Během nabíjení svítí ČERVENÉ SVĚTLKO.

Plně nabití, avšak se stále připojenou nabíječkou, indikuje rozsvícení ZELENÉHO SVĚTLKA.

Plně nabitý přístroj umožňuje asi 60minutový provoz.