

NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR INFRAHEALTH

SOUČÁSTI VÝROBKU


Teploměr



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- způsob měření: bez kontaktu (čelní),
- vzdálenost měření: 3–5 cm,
- napájení: DC 3.0V (2x AAA baterie – nejsou součástí výrobku),
- velikost: 190 mm × 40 mm × 40 mm,
- hmotnost: 67 g,
- automatické vypnutí: po 15 s,
- tolerance:
 - 32 °C – 34.9 °C (±0.3 °C)
 - 35 °C – 42 °C (±0.2 °C)
 - 42.1 °C – 42.5 °C (±0.3 °C)

ZOBRAZENÍ:

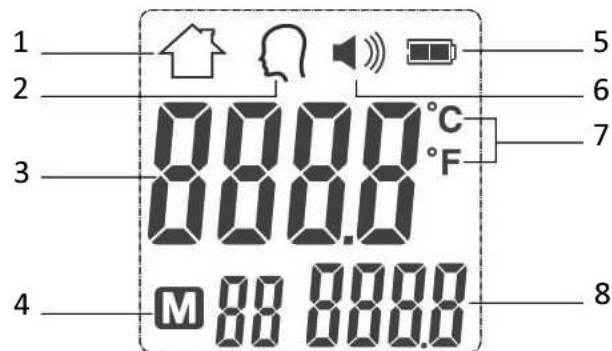

- 1 – teplota okolí,
- 2 – tělesná teplota,
- 3 – hodnota změřené teploty,
- 4 – pořadové číslo uložené změřené teploty,
- 5 – stav baterie,
- 6 – zvuk/bez zvuku,
- 7 – stupnice Celsius/Fahrenheit,
- 8 – hodnota změřené a uložené teploty.

OVLÁDÁNÍ

Digitální infračervený teploměr Infrahealth umožňuje bezkontaktní měření tělesné teploty.

Teploměr je napájen 2 AAA bateriemi, které vložíme do jeho zadní části. Baterie nejsou součástí výrobku.

Měření tělesné teploty provedeme tak, že teploměr přiložíme k čelu na vzdálenost 3 až 5 cm a přidržíme tlačítko SCAN.

Každá naměřená hodnota je automaticky uložena (viz č. 4 na obrázku). Již změřené hodnoty teploty si prohlédneme zmáčknutím tlačítka + nebo -.

Krátkým zmáčknutím tlačítka MODE přepínáme mezi měřením teploty povrchu a tělesné teploty.

Výchozí nastavení teploměru změníme ve funkčním menu.

Funkce F1 – změna stupnice

Po dobu 2 s přidržíme tlačítko MODE. Jakmile se objeví F1, zmáčkneme + a tím zvolíme Celsiovu stupnici, respektive - a zvolíme Fahrenheit.

Funkce F2 – výstražná hodnota teploty

Výchozí nastavení výstražné teploty je 38 °C. Hodnotu změníme po přidržení tlačítka MODE. Jakmile se objeví F1, opět krátce zmáčkneme MODE a po zobrazení F2 změníme výstražnou hodnotu teploty tlačítky + a -.

Funkce F3 – kalibrace teploty

Pokud se naměřené hodnoty liší od měření jiných zařízení, kalibrujeme teploměr pomocí funkce F3. Pomocí tlačítka MODE se dostaneme až na zobrazení F3 a tlačítky + a - opravíme teplotu v rozmezí od -3 °C do 3 °C.

Funkce F4 – vypnutí/zapnutí zvuku.

Pomocí tlačítka MODE dojdeme k F4, kde zapneme (ON), respektive vypneme (OFF) zvuk.

DŮLEŽITÉ

- Před použitím ověříme, zda je senzor a otvor na sondu čistý popř. vyčistíme.
- V případě, že potřebujeme teploměr použít v prostředí s různými teplotami (venkovní a vnitřní prostory), respektive je rozdíl mezi jednotlivými teplotami velký, vždy po měření a změně prostředí počkáme až 30 min.
- V případě, že jsme změřili vysokou teplotu na předmětu, s měření tělesné teploty vyčkáme až 30 min.
- Teplotu neměříme po mytí, sportu a pocení, aplikaci kosmetických přípravků apod., mohlo by dojít ke zkreslení výsledků měření.
- Teplotu měříme alespoň za 30 min po jídle, sprchování či cvičení.
- Výrobek nepoužíváme v blízkosti vody či vznětlivých látek. Vyhneme se manipulaci mokřýma rukama, tělem či kontaktu s vodou.
- Čistíme suchým hadrem.
- K údržbě nepoužíváme abrazivní prostředky.
- Nenamáčíme do tekutin.
- V případě, že teploměr po delší dobu nepoužíváme, odstraníme baterii.
- Skladujeme na suchém místě bez prachu.
- Dodržujeme předpisy ochrany životního prostředí o recyklaci.