

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FOOTSY ELEKTROMOS MASSZÁZSPÁRNA

CSOMAG TARTALMA


- Masszázs párna
- Vezérlőegység
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: 2 x AAA elem (nem mellékelt)
- Frekvencia: 1-100 Hz
- Méret: 32.5 x 29.5 cm
- Súly: 57.4 g



KOMPONENSEK

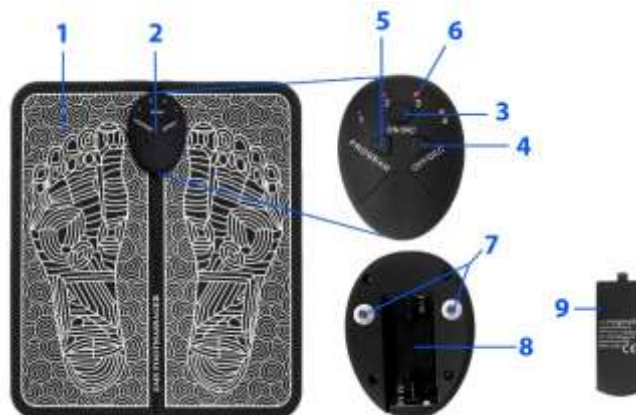

- (1) Masszázs párna
- (2) Vezérlőegység
- (3) Bekapcsolás/intenzitás növelése gomb
- (4) Kikapcsolás/intenzitás csökkentése gomb
- (5) Módválasztó gomb
- (6) Lámpák az üzemmód megjelenítéséhez
- (7) Csatlakozók
- (8) Elemtartó rekesz
- (9) Elemtartó rekesz fedele

A KÉSZÜLÉKRŐL

Az elektromos izomstimuláció az izmok összehúzódásának módja elektromos energia felhasználásával. Elsősorban terápiákon alkalmazzák az izmok erősítésére sérülések után és segítségként a rehabilitációban. Segíti megelőzni az izomsorvadást, fokozza a vérkeringést és ellazítja az izmokat.

HOGYAN HASZNÁLJA

Megjegyzés: Ez nem orvosi eszköz és csak otthoni használatra szolgál. Nem szolgál az orvos vagy a terapeuta által biztosított eszközök illetve készülékek helyettesítésére. Első használat előtt olvassa el a teljes használati utasítást!

○ ELEMEL BEHELYEZÉSE


- A készülék 2 AAA elemet használ.
- Nyissa ki a készülék hátoldalán található fedelet.
- Helyezze be az elemeket és ügyeljen azok polaritására.
- Zárja be a fedelet.

○ HASZNÁLAT

- Helyezze a masszázspárnát a padlóra, hogy kényelmesen ülhessen a lábait a betét megjelölt területére helyezve.
- Pattintsa be a vezérlőegységet a párnára. A párna tetején két gomb található, amelyekre rá kell helyezni a vezérlőegységet.
- Mezítlábbal helyezkedjen el a párna megjelölt területein. A készülék nem fog működni, ha zoknit visel.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (3).
- Válassza ki a masszázs módot a „program” gomb megnyomásával. Összesen 6 mód van, az állandó masszázstól a különböző impulzusokig. Válassza ki azt, amelyik a legjobban megfelel. Mielőtt más módokkal

kísérletezne, azt javasoljuk, hogy próbálja ki az A módot, hogy alkalmazkodjon a masszírozóhoz.

- A jelzőfények az alábbiak szerint mutatják az üzemmódokat:

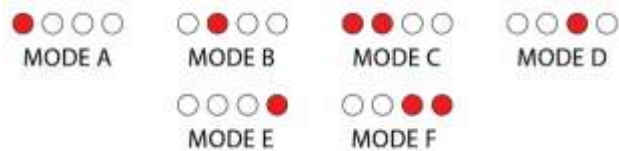

- Miután kiválasztotta a kívánt módot, nyomja meg a bekapcsológombot (3) a kezelés megkezdéséhez. Az „INC”(3)/„DEC”(4) gombokkal állítsa be a kívánt intenzitást. Javasoljuk, hogy kezdje alacsony intenzitással és növelje azt, ahogy megszokja.
- 10 intenzitás szint létezik. Ezek megvannak jelölve jelzőlámpákkal. Alacsony intenzitás - gyenge fény; nagy intenzitású - erős fény.
- A masszírozó 12 percig működik, ez az ajánlott kezelési idő. Ezt követően automatikusan kikapcsol.
- Ha az idő lejárt előtt ki akarja kapcsolni a készüléket, nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot (4).

FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket soha nem szabad diagnosztizálatlan tünetek miatti fájdalom enyhítésére vagy csökkentésére használni.

- NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ha szívritmus-szabályozója vagy bármilyen más orvosi implantátuma van, terhes, mélyvénás trombózisban szenved, magas vérnyomása vagy bármilyen szívbetegsége van.
- A készülék használata nem ajánlott, ha sérülése vagy sebe van a lábán és a talpán.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket csak a lábának masszírozására használja. A test bármely más részén történő használata veszélyes következményeket okozhat.
- A termék nem vízálló. Ne mossa, ne használja magas páratartalmú helyiségben (fürdőszoba).
- Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne szerelje szét. Meghibásodás esetén vigye el a készüléket szervizre.
- Ha nem használja, tárolja az eredeti dobozban.
- Ne hagyja, hogy a készülék bármilyen fémtárggyal érintkezzen.
- Csak a tartozékokat használja. Semmilyen módon ne módosítsa.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFCU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------