

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Finish Touch lézeres szőrtelenítő

KOMPONENSEK

Epilátor védő kupakkal

Sensa-Light fej

Mikroszálás fej

Tisztítókefe

Töltőkábel



JELLEMZŐI/FUNKCIÓI

Sensa-Light fej:

- A fej használata közben a készülék a bőrrel való érintkezéskor megkezdheti a munkát.
- A készülék fejét óvatosan 45°-os szögben csúsztassa a szőr növekedésével ellenkező irányába.
- Fontos: Ne használja a készüléket 90°-os szögben / egyenesen felfelé és lefelé.



- Fontos: Ne használjon túlzott nyomást használat során, hogy elkerülje a bőr és a készülék sérülését. Ha bármilyen bőrirritáció jelenik meg, hagyja abba a készülék használatát.

Mikroszálás fej:

- Rövid szőr esetén ajánlott a használata.
- A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket egyenesen felfelé és lefelé (90°-os szögben) - ellentétben a Sensa-Light fejjel) és enyhén nyomja rá a felületre.

Az első használat előtt töltsen fel a készüléket. A készülék bekapcsolásához húzza a gombot JOBBRA (ahogy a képen látható).




A készülék kikapcsolásához húzza a gombot BALRA.

A FEJEK CSERÉLÉSE



A fej cseréjéhez helyezze a hüvelykujját a készülék hátoldalára. Óvatosan tolja a nyíl irányába - előre és felfelé.

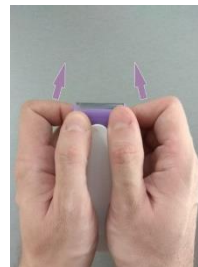

Helyezze fel az új kívánt fejet, és nyomja le, amíg az nem kattant egyet.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használja a készüléket zuhany alatt, víz közelében vagy nedves helyiségben.
- Ne öblítse le a fejet víz alatt. A fej tisztításához használja a mellékelt tisztító kefét, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha nem használja a készüléket egy ideig, tárolja száraz helyen.
- A legjobb teljesítmény érdekében ne használja a készüléket töltés közben.
- A készülék fejét két egy-két csepp ásványi / baba olajjal csepegtetheti meg.

TÖLTÉS

Az első használat előtt teljesen fel kell töltenie a készüléket. A töltés kb. 2 és fél órát vesz igénybe.

A PIROS LÁMPA töltés közben világít.

A ZÖLD LÁMPA akkor világít, amikor a készülék teljesen fel van töltve, de a töltő még mindig csatlakozva van a készülékhez.

A teljesen feltöltött akkumulátor lehetővé teszi, hogy a készüléket körülbelül 60 percig használja.