

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DIGITÁLIS INFRAHEALTH INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ

KOMPONENS


Hőmérő



MŰSZAKI ADATOK

- Mérési módszer: érintés mentes
- Mérési távolság: 3 – 5
- Teljesítmény: DC 3.0V (2x AAA bateriji – nem mellékelte)
- Méret: 190 mm × 40 mm × 40 mm
- Súly: 67 g
- Autómatikus kikapcsolás: 15 másodperc után
- Tolerancia:
 - 32° C – 34.9° C (± 0.3° C)
 - 35° C – 42° C (± 0.2° C)
 - 42.1° C – 42.5° C (± 0.3° C)

MEGJELENÍTÉS

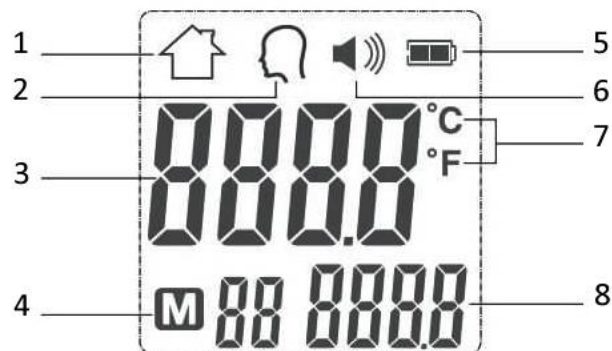

- 1 - Felületi hőmérséklet
- 2 - Testhőmérséklet
- 3 - A mért hőmérséklet megjelenítése
- 4 - A mentett hőmérséklet helyszíne
- 5 - Az elem állapota
- 6 - Hang / hang nélkül
- 7 - Celsius / Fahrenheit skála
- 8 - Megmért mentett hőmérséklet

HASZNÁLAT

Az Infrahealth digitális infravörös hőmérő lehetővé teszi a testhőmérséklet mérését kontakt illetve érintés nélkül.

A működtetéshez két AAA elemre van szüksége, amelyek nem mellékeltek. Az elemeket helyezze be a termék hátoldalába.

A testhőmérsékletet úgy mérje, hogy a hőmérőt a homlokától 3 és 5 centiméter közötti távolságra helyezi, eközben pedig a SCAN gombot lenyomva tartja.

Minden mért hőmérséklet automatikusan mentésre kerül (lásd a 4. ábrát). Nyomja meg a + vagy - gombot a korábban mért hőmérsékletek megtekintéséhez.

Nyomja meg a MODE gombot a felületi hőmérséklet és a testhőmérséklet mérési mód közötti váltáshoz.

A hőmérőnek alapértelmezett beállításai vannak. Megváltoztathatja őket a funkcionális menü használatával:

Funkció F1 – A mérő skála módosítása: A skála módosításához tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig. Amikor megjelenik az F1, nyomja meg a + gombot a Celsius skálához és a - gombot a Fahrenheit-skálához.

Funkció F2 - Hőmérséklet figyelmeztetés: Az alapértelmezett figyelmeztető beállítás 38 ° C. Az érték módosításához nyomja meg a MODE gombot két másodpercig. Amikor megjelenik az F1, nyomja meg röviden a MODE gombot. Ha az F2 jelenik meg, a + és - gombokkal, a hőmérséklet figyelmeztetés értékét változtathatja.

Funkció F3 - Hőmérséklet-kompenzáció: Ha a mérés eltér a többi mérőeszköztől, ezzel a funkcióval beállíthatja a megjelenített hőmérsékletet. Ugyanezzel az eljárással helyezkedjen el a F3 menüben, és a + és - gombok segítségével korrigálja az értéket a legkevesebb -3 ° C és a legtöbb 3 ° C között.

Funkció F4 - Hang bekapcsolása/ kikapcsolása. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, helyezkedjen el a F4 menüben, amelyben az ON beállítás azt jelzi, hogy a hang be van kapcsolva, és az OFF pedig azt, hogy ki van kapcsolva.

FONTOS INFORMÁCIÓK

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az érzékelő és a szonda nyílása tiszta-e
 - Ha a hőmérőt különböző hőmérsékletekben szeretné használni (kültéri és beltéri helység), vagyis a hőmérsékletkülönbségek magasak, legalább 30 percet kell várni minden alkalommal, amikor környezetet vált
 - Ha egy tárgyon magas hőmérsékletet mért, várjon 30 percet a testhőmérséklet mérése előtt
 - Ha reális mérési eredményeket szeretne, akkor fürdés, rekreáció, izzadás és kozmetikai termékek használata után ne mérje a hőmérsékletét
 - A hőmérsékletét mérje legalább 30 perc elteltével étkezés, zuhany vagy edzés után.
 - Ne használja a terméket vízzel vagy gyúlékony anyagokkal, nedves kézzel vagy testtel illetve vízzel érintkezve
 - A készüléket száraz ruhával tisztítsa
 - Ne használjon tisztítószereket
 - Ne merítse folyadékba
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet
 - Javasoljuk, hogy mindkét elemet egyszerre cserélje
 - Száraz, pormentes helyen tárolja
 - Vegye figyelembe az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat
-