

INSTRUKCJE OBSŁUGI

DEPILATOR IPL EPICARE

KOMPONENTY

- Depilator IPL
- Kabel zasilania
- Instrukcja obsługi




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Typ lampki: lampa ksenonowo-kwarcowa
- Żywotność lampy: 300 000 zastosowań
- Źródło światła: intensywne światło impulsowe (IPL)
- Energia na impuls: 1,5-3,9 J/cm²
- Rozmiar ostrości: 33 × 10 mm²
- Długość fali: 470~1100 nm
- Zasilacz sieciowy: AC 100~240 V @ 12 V DC 2.5~3 A
- Warunki pracy - zakres temperatur: ~5–30 °C
- Warunki pracy - wilgotność powietrza: ~30-60%
- Waga: 186 g
- Rozmiar: 124 × 83 × 48,5 mm

ZASADY DZIAŁANIA

IPL oznacza technologię intensywnego światła impulsowego. Domowe urządzenia do depilacji IPL wykorzystują delikatne impulsy świetlne o szerokim spektrum, skierowane na melaninę w aktywnych mieszkach włosowych. Gdy światło jest wchłaniane, łydyga włosa jest podgrzewana, co niszczy brodawkę wytwarzającą włos. Niszczy to tylko aktywne mieszki włosowe, co powoduje, że włosów jest mniej i są one bardziej miękkie. Aby zapewnić długotrwałe rezultaty, należy używać urządzenia raz na dwa tygodnie, przez co najmniej 2 miesiące.

KOMPONENTY

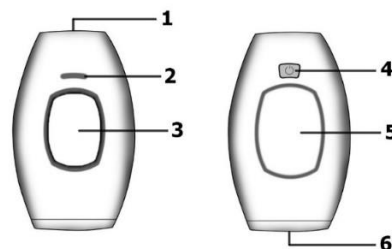

- (1) Gniazdko zasilania / wylot powietrza chłodzącego
- (2) Dioda kontrolna pokazująca intensywność/gotowość urządzenia
- (3) Przycisk błysku
- (4) Przycisk intensywności światła z lampką kontrolną
- (5) Przycisk błysku
- (6) Okienko zabiegowe

OSTROŻNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować do późniejszego wykorzystania.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli masz nieodpowiedni kolor włosów lub skóry. Zabieg jest nieskuteczny w przypadku włosów jasnych, siwych, białych lub rudych. Używanie produktu na ciemnobrązowej lub czarnej skórze może powodować podrażnienia, oparzenia, przebarwienia, silne zaczerwienienia.
- Sprawdź poniższą tabelę kontrastową skóry i włosów, aby upewnić się, że możesz używać urządzenia skutecznie i bez ryzyka podrażnienia.

Skin \ Hair	Light	Light-Medium	Medium	Dark-Medium	Dark	Very Dark
Light	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light-Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark-Medium	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Very Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Rys. 1 Horyzontalnie: kolor skóry; pionowo: kolor owłosienia


- Najlepsze efekty można osiągnąć przy jasnej skórze i ciemnych włosach.

- Nie należy używać urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmiąca piersią. Zmiany hormonalne mogą wpływać na wrażliwość skóry.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz problemy ze skórą, chorobę skóry lub oparzenia słoneczne.
- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy używać urządzenia na obszarach skóry z ranami strupowymi, wyleczonymi, zmamiami, znamionami wrodzonymi, suchą i wrażliwą lub uszkodzoną skórą, na sutkach itp.
- Nie należy używać urządzenia na ostatnio (co najmniej dwa tygodnie) opalanej lub sztucznie opalanej skórze.
- Używaj urządzenia tylko na nogach i rękach.
- Należy ogolić miejsca, które mają być poddane zabiegowi. Używanie urządzenia na nieogolonych miejscach może powodować niepożądane efekty.
- Oczyszczyć skórę i upewnij się, że nie zawiera ona włosów i jest sucha od wszelkich substancji takich jak kremy, dezodoranty, balsamy, perfumy, kremy do opalania, filtry przeciwsłoneczne itp. Używanie urządzenia w połączeniu z kremami, balsamami i innymi produktami do pielęgnacji skóry może powodować niepożądane efekty.

- Wykonaj test skórny podczas pierwszego użycia urządzenia na każdym z miejsc, które chcesz zastosować, aby określić intensywność zabiegu i przyzwyczaić się do zabiegu na bazie światła. Więcej na temat testu skórny w rozdziale: Przygotowanie do pierwszego użycia.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Podłączyć kabel zasilający do urządzenia i do gniazdka elektrycznego.
- Podłączyć kabel zasilający do urządzenia i do gniazdka elektrycznego. Zapali się zielona kontrolka i będzie można usłyszeć, że urządzenie działa. Czerwona lampka kontrolna (2) jest włączona.
- Przenieść urządzenie blisko skóry, tak aby okienko zabiegowe (6) miało bezpośredni kontakt z powierzchnią skóry.
- Czerwona lampka kontrolna (2) powinna zacząć migać, gdy czujnik w urządzeniu wykryje Twoją skórę. Jeśli lampka kontrolna nie miga, zbliżaj ją do skóry, aż zacznie migotać lub uruchom ponownie urządzenie, wyłączając je i ponownie włączając.
- Należy ustawić poziom intensywności, naciskając przycisk intensywności (4), aby przechodzić między różnymi poziomami intensywności jest wskazywany za pomocą niebieskich kontrolki (2).

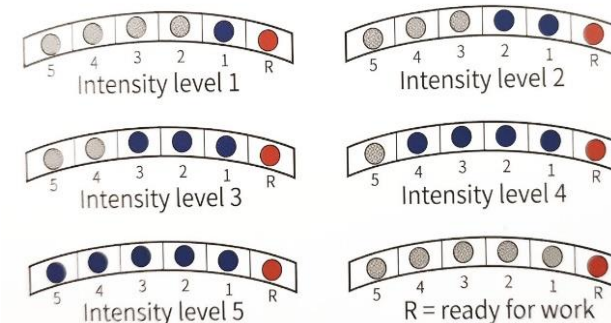

- Po ustawieniu poziomu intensywności, umieść okienko zabiegowe na skórze i zakryj ją całkowicie. Czerwona lampka kontrolna zacznie migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.
- Naciśnij przycisk błysku (3). Urządzenie będzie migać raz, a lampka kontrolna zgaśnie na 1-3 sekundy, aż będzie gotowe do ponownego użycia.
- Dostępne są dwa tryby pracy: automatyczny i ręczny. Urządzenie uruchamia się w trybie manualnym.
- Aby wybrać tryb automatyczny, wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy wyłącznik światła impulsowego. Niebieska kontrolka zacznie migać, wskazując tryb automatyczny.
- W trybie automatycznym, urządzenie będzie migać automatycznie, jeśli trzymasz je blisko skóry. Przesuń urządzenie po każdym mignięciu. Urządzenie przestanie migać po usunięciu ze skóry i będzie nadal migać po ponownym wykryciu skóry.

- Aby powrócić do trybu ręcznego, wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk błysku (3).
- Urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeśli pozostanie bezczynne przez 5 minut. Wystarczy kliknąć przycisk zasilania, aby go znowu uruchomić. Należy pamiętać, że intensywność powróci do poziomu 1 po ponownym uruchomieniu.
- Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy.
- Należy odłączyć urządzenie od przewodu zasilającego i pozostawić je na kilka minut do ostygnięcia.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO UŻYCIA

- Ogolić i oczyścić obszary skóry, które chcesz pielęgnować. Oczekaj co najmniej dwie godziny po goleniu, aby podrażnienia skóry zniknęły.
- Sprawdź okienko zabiegowe pod kątem ewentualnych ukrytych zanieczyszczeń lub włosów i wyczyść je za pomocą medycznych chusteczek z alkoholem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Wykonaj test skóry w celu określenia najlepszego poziomu intensywności i przyzwyczajania się do leczenia światłem.
- Wybierz odpowiedni obszar skóry, na którym chcesz wykonać test.

- (7) Ustawić intensywność urządzenia na 1, następnie umieścić je na skórze pod kątem 90° (okienko zabiegowe musi ściśle dotykać skóry) i nacisnąć przycisk błysku (3). Nie należy migać więcej niż raz na każdym fragmencie skóry.
- Przenieść urządzenie na inny fragment skóry, zwiększyć intensywność o jeden poziom i powtórzyć ten sam proces, aż do osiągnięcia najwyższego poziomu lub do momentu, gdy poczujesz dyskomfort/ból.
 - Oczekaj 24 godzin po tym badaniu, aby zobaczyć jak Twoja skóra reaguje na zabieg.
 - Na podstawie tego testu wybierasz intensywność zabiegu, z którą czujesz się najbardziej komfortowo i z którą osiągniesz najlepsze rezultaty.
 - Im ciemniejsza skóra, tym niższe ustawienie, które należy zastosować, aby zminimalizować niepożądane efekty uboczne.
 - Oczekiwane efekty stosowania urządzenia: krótkotrwałe uczucie ciepła, lekkie zaczerwienienie, lekkie ukłucie za każdym razem, gdy używasz aparatu.
 - Jeżeli podczas wykonywania badania skóry wystąpią jakiegokolwiek inne negatywne efekty niż opisane powyżej, należy porozmawiać z lekarzem na temat korzystania z urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA OWŁOSIENIA

- To normalne, że włosy są nadal widoczne po kilku pierwszych zabiegach.
- Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować urządzenie raz na dwa tygodnie przez okres do 3 miesięcy. Następnie należy stosować urządzenie raz na 2-3 miesiące, aby zachować gładkość skóry i zmniejszyć wzrost włosów.
- Używaj tego urządzenia tylko do usuwania włosów na nogach i rękach.
- Upewnij się, że wykonane zabiegi są blisko siebie, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Nie migaj więcej niż raz w tym samym obszarze skóry!
- Skóra po użyciu może wykazywać lekkie zaczerwienienie lub uczucie mrowienia. Uspokój ją zimną wodą lub zimną, mokrą szmatką lub okładem z lodu.
- Czasami po zabiegu skóra może być sucha lub swędząca z powodu połączenia golenia i używania urządzenia. Jeśli uczucie to utrzymuje się przez kilka dni, 24 godzin po zabiegu użyj bezzapachowego preparatu nawilżającego na skórze.
- Oparzenia, nadmierne zaczerwienienia lub obrzęki mogą pojawić się, jeśli używasz urządzenia na ustawieniach zbyt wysokich dla Twojego typu skóry. Zmniejsz intensywność przy następnym użyciu. Jeśli

efekt ten trwa dłużej niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem.

- Nie należy stosować żadnych produktów kosmetycznych na skórę po zabiegu.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Urządzenie należy czyścić przed i po każdym użyciu. Do czyszczenia okienka zabiegowego należy używać medycznych chusteczek z alkoholem.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, umieścić je w swoim opakowaniu i starannie przechowywać w suchym pomieszczeniu.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli urządzenie przestanie działać, nie próbuj go samodzielnie naprawiać.
- Jeśli czerwona lampka nie miga podczas używania urządzenia, to znaczy, że nie funkcjonuje poprawnie. Należy zbliżyć urządzenie do skóry lub wyłączyć je i ponownie włączyć.
- Używanie aparatu w warunkach nieoptymalnych może doprowadzić do jego przegrzania, co spowoduje uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem. W tym trybie wszystkie niebieskie światła migają jednocześnie, a funkcja migania jest wyłączona. Gdy temperatura wewnętrzna urządzenia powróci do normalnej

temperatury, światła przestaną migać i będzie można ponownie z niego korzystać. Intensywność migania powróci do poziomu 1.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie zanurzać w wodzie i nie używać wody do czyszczenia urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Używać tylko na nogach i rękach.
- W żadnym wypadku nie należy używać urządzenia na oczach lub w ich pobliżu. Może to spowodować ślepotę.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
- Upewnij się, że nic nie blokuje przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru po jego włączeniu.
- Urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może naprawić. Nie należy go rozmontowywać.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie należy używać urządzenia na kretach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych przebarwieniach, bliznach, tatuażach lub innych anomaliach na skórze. Może to spowodować oparzenie lub/i zmianę koloru skóry.
- Dokładnie sprawdź tabelę w rozdziale OSTROŻNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM,

aby sprawdzić czy Twój kolor skóry i włosów jest zgodny z zabiegiem.

- Unikaj opalania się podczas regularnego używania urządzenia (co dwa tygodnie).
- Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zmniejsz natężenie światła.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	---