

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### DEPILATOR LASEROWY

#### OPAKOWANIE ZAWIERA:

Depilator z pokrywką zabezpieczającą nóż i sitko

Głowica Sensa-Light

Głowica z mikro folią

Szczoteczka do czyszczenia

Kabel do ładowania

#### CECHY

Głowica Sensa-Light:

- Urządzenie rozpocznie działać po kontakcie ze skórą.
- Delikatnie przesuwaj głowicę jednostki wzdłuż skóry w przeciwnym kierunku wzrostu włosów pod kątem 45°.
- UWAGA: Nie używaj urządzenia pod kątem 90° / prosto w górę i w dół.
- Ważne: NIE WOLNO wywierać nadmiernego nacisku podczas używania, aby uniknąć uszkodzenia skóry lub głowicy urządzenia. Należy zaprzestać stosowanie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek podrażnień skóry.



Głowica z mikro folią:

- Używane do krótkich włosów lub stylizacji.
- Aby uzyskać lepsze rezultaty, należy trzymać urządzenie prosto w górę i w dół (kątem 90° - w przeciwieństwie do głowicy Sensa-Light) i wywierać niewielki nacisk.




Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem. Aby włączyć urządzenie należy przełączyć przycisk w prawo (jak na poniższym zdjęciu).




Aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć przycisk w lewo.

#### ZMIANA GŁOWIC

Aby wymienić głowicę, umieść palce z tyłu urządzenia. Delikatnie wcisnąć w kierunku strzałki - do przodu i ruchem do góry.

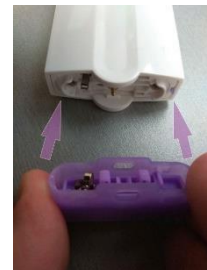

Prawidłowo ustaw nową głowicę w odpowiedniej linii i naciśnij ją w dół, aż do kliknięcia.

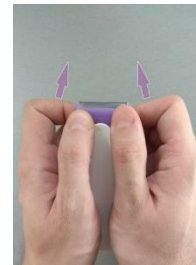

#### UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE

- Nie należy używać urządzenia pod prysznicem, w pobliżu wody lub w wilgotnym pomieszczeniu.
- Nie płukać głowicy pod wodą. Do czyszczenia głowicy należy używać szczotki czyszczącej, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w suchym miejscu.
- Aby zapewnić najlepszą wydajność, nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
- Można nasmarować głowicę kroplą oleju (mineralnego lub dla niemowląt).

#### ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Ładowanie zajmie około 2 i pół godziny.

CZERWONE ŚWIATŁO będzie świecić podczas ładowania.

ZIELONE ŚWIATŁO będzie świecić, gdy urządzenie jest w pełni naładowane i gdy ładowarka jest nadal podłączona do urządzenia.

Całkowicie naładowany akumulator pozwoli Ci korzystać z urządzenia przez około 60 minut.