

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

APARAT ELECTRIC DE MASAJ FOOTSY

CONTINUTUL PACHETULUI:


- Aparat electric de masaj
- Unitatea de control
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: 2 x baterii AAA (nu sunt incluse)
- Frecvență: 1-100 Hz
- Dimensiuni: 32.5 x 29.5 cm
- Greutate: 57.4 g



COMPONENTE

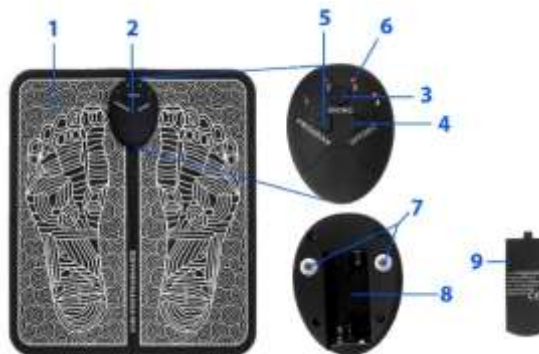

- (1) Aparat electric de masaj
- (2) Unitatea de control
- (3) Butonul de pornire (ON)/creșterea intensității
- (4) Butonul de oprire(OFF)/scăderea intensității
- (5) Butonul de selectare a modului
- (6) Indicator luminos de mod
- (7) Conectori
- (8) Compartiment pentru baterii
- (9) Capacul compartimentului pentru baterie

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Electrostimularea musculară (EM) este o modalitate de a face mușchii să se contracte folosind impulsurile electrice. Aparatele de electrostimulare musculară sunt utilizate în terapia de reabilitare și pentru întărirea mușchilor după o leziune. Utilizarea aparatelor de electrostimulare musculară ajută la prevenirea atrofiei musculare, crește circulația sângelui și relaxează mușchii.

MODUL DE UTILIZARE

Notă: Acesta nu este un dispozitiv medical și este destinat numai pentru uzul casnic. Acest dispozitiv nu este destinat să înlocuiască un dispozitiv, care a fost furnizat de un medic sau terapeut! Citiți integral manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare!

○ INSTALAREA BATERIILOR


- Dispozitivul este alimentat de 2 baterii AAA.
- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii din spatele unității de control.
- Instalați bateriile respectând polaritatea corectă.
- Fixați capacul la loc.

○ MODUL DE UTILIZARE

- Puneți aparatul electric de masaj pe podea, astfel încât să puteți sta confortabil cu picioarele în zonele marcate pe covoraș.
- Fixați unitatea de control pe conectorii de pe covoraș. Conectorii de tip capse se află pe partea superioară a covorașului.
- Puneți picioarele goale pe zonele marcate de pe covoraș. Dispozitivul nu va funcționa dacă purtați șosete.
- Țineți apăsat butonul de pornire (3) pentru a porni dispozitivul.
- Alegeți modul de masaj apăsând butonul „program”. Sunt disponibile 6 moduri de masaj. Alegeți modul care vi se potrivește

cel mai bine. Înainte de a experimenta cu alte moduri, vă sfătuim să încercați modul A pentru a vă obișnui cu masajul.

- Indicatorul luminos indică modurile după cum urmează:

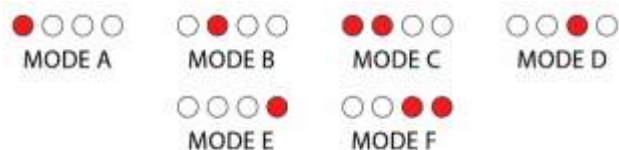

- După ce selectați modul, apăsați butonul de pornire (3) pentru a începe ciclul de masaj. Utilizați butoanele „INC” (3)/”DEC” (4) pentru a seta intensitatea dorită. Vă recomandăm să începeți la o intensitate redusă și să o măriți pe măsură ce vă obișnuiți.
- Sunt disponibile 10 niveluri de intensitate. Luminozitatea becurilor LED ale indicatorului luminos arată nivelul de intensitate. Intensitate scăzută - lumină slabă; intensitate ridicată - lumină puternică.
- Un ciclu de masaj durează 12 minute, ceea ce reprezintă timpul recomandat. Aparatul se va opri automat după finalizarea unui ciclu de masaj.
- Dacă doriți să opriți dispozitivul înainte de expirarea timpului țineți apăsat butonul de oprire (4).

ATENȚIE

- Dispozitivul nu trebuie utilizat niciodată pentru ameliorarea sau reducerea durerii cauzate de simptome nediagnosticate.
- NU UTILIZAȚI DISPOZITIVUL DACĂ aveți un stimulator cardiac sau orice alt implant medical, sunteți gravidă, aveți tromboză venoasă profundă, aveți tensiune arterială crescută, aveți orice boală cardiacă.
- Nu este recomandat să utilizați dispozitivul dacă aveți vătămări sau răni la picioare sau pe tălpi.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut.
- Folosiți dispozitivul doar pentru masarea picioarelor. Folosirea acestuia pe orice altă parte a corpului poate avea consecințe periculoase.
- Produsul NU este rezistent la apă. Nu spălați și nu utilizați produsul în locuri cu umiditate ridicată (baie).
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.
- Nu dezamblați. În caz de defecțiune, returnați aparatul sau duceți-l la un centru de service specializat.
- A se păstra în cutia originală atunci când nu este utilizat.
- Nu lăsați aparatul să intre în contact cu obiectele metalice.

- Utilizați numai accesoriile furnizate. Nu modificați dispozitivul în niciun fel.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.