

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

TERMOMETRU DIGITAL CU INFRAROȘU NFRAHEALTH

COMPONENTE


Termometrul digital cu infraroșu InfraHealth



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Metoda de măsurare: măsurarea precisă fără contact
- Distanța de măsurare: 3 - 5 cm
- Alimentare: DC 3.0V (2x baterii AAA - nu sunt incluse)
- Dimensiune: 190 mm × 40 mm × 40 mm
- Greutate: 67 g
- Oprirea automată: după 15 secunde
- Marja de eroare:
 - 32° C – 34.9° C (± 0.3° C)
 - 35° C – 42° C (± 0.2° C)
 - 42.1° C – 42.5° C (± 0.3° C)

AFIȘAJ

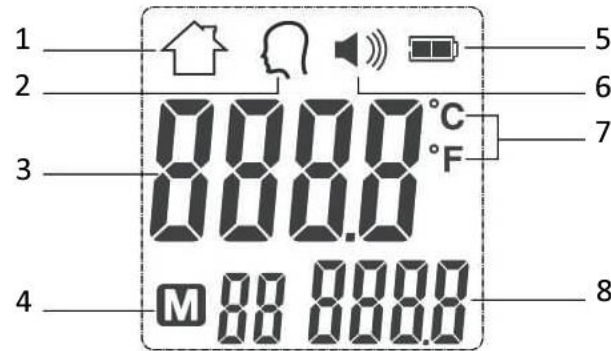

- 1 – Suprafață / temperatură exterioară
- 2 – Temperatura corpului
- 3 – Afișaj digital
- 4 – Indicator de măsurare
- 5 – Indicator baterie
- 6 – Indicator de sunet
- 7 – Temperatură ° C/° F
- 8 – Temperatura măsurată și înregistrată

FUNCȚII ȘI UTILIZARE

Termometrul digital cu infraroșu Infrahealth oferă o măsurare precisă fără contact a temperaturii corpului și a diferitor obiecte.

Pentru funcționarea termometrului este nevoie de două baterii AAA (nu sunt incluse). Introduceți-le în slotul de pe partea din spate a produsului.

Temperatura corpului este măsurată prin direcționarea termometrului spre frunte la o distanță de 3-5 centimetri și ținând apăsat butonul SCAN (scanare).

Fiecare măsurare a temperaturii este salvată automat. Apăsați butonul + sau - pentru a vizualiza măsurările anterioare a temperaturii.

Apăsați scurt butonul MODE pentru a comuta între modul de măsurare a temperaturii unui obiect și modul de măsurare a temperaturii corpului.

Termometrul are setările implicite. Le puteți modifica utilizând meniul funcții:

Funcția F1 - modificați scala de măsurare: pentru a schimba scala, țineți apăsat butonul MODE timp de două secunde. Când apare F1, apăsați + pentru Celsius și - pentru Fahrenheit.

Funcția F2 - avertizare de temperatură ridicată: setarea de avertizare implicită este de 38 ° C. Pentru a modifica această valoare, țineți apăsat butonul MODE timp de două secunde. Când apare F1, apăsați scurt butonul MODE. Când apare afișat F2, puteți schimba cu + și - valoarea temperaturii pentru semnalul de avertisment.

Funcția F3 - Compensarea temperaturii: Dacă măsurarea se abate de la rezultatul altor dispozitive de măsurare, această temperatură poate fi compensată cu ajutorul temperaturii afișate. Folosind aceeași procedură, activați funcția F3 și folosiți butoanele + și - pentru a corecta valoarea în intervalul de la -3 ° C la 3 ° C.

Funcția F4 - Dezactivați / activați sunetul.

IMPORTANT

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că senzorul și sonda termometrului sunt curate.
- Dacă doriți să utilizați un termometru la diferite temperaturi ale aerului (în aer liber și interior), diferențele de temperatură sunt ridicate, prin urmare trebuie să așteptați până la 30 de minute de fiecare dată după schimbarea mediului.
- Dacă ați măsurat temperatura ridicată al unui obiect, așteptați până la 30 de minute înainte de măsurarea temperaturii corporale.
- Pentru rezultate mai precise: Nu măsurați temperatura corporală după duș, sport, aplicarea produselor cosmetice etc.
- Nu măsurați temperatura corporală după masă, imediat după trezire, după plâns, după baie, după efortul fizic sau după defecație. Asigurați-vă că sunteți hidratat corespunzător, că nu vă aflați într-o cameră supraîncălzită sau după expunere prelungită la soare.
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- A se depozita într-un loc uscat, fără praf.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului,

prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

