

## NAVODILA ZA UPORABO

### DIGITALNI INFRARDEČI TERMOMETER INFRAHEALTH

#### KOMPONENTE


Termometer



#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Način merjenja: brezkontaktni (čelni)
- Merilna razdalja: 3 – 5 cm
- Napajanje: DC 3.0V (2x AAA bateriji – nista priloženi)
- Velikost: 190 mm × 40 mm × 40 mm
- Teža: 67 g
- Avtomatski izklop: po 15 sekundah
- Območje tolerance:
  - 32° C – 34.9° C (± 0.3° C)
  - 35° C – 42° C (± 0.2° C)
  - 42.1° C – 42.5° C (± 0.3° C)

#### PRIKAZ

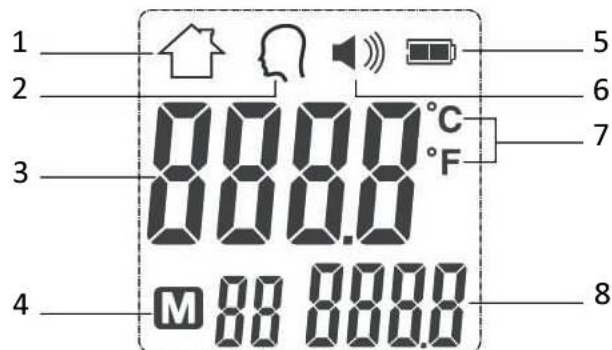

- 1 – Površinska temperatura
- 2 – Telesna temperatura
- 3 – Prikaz izmerjene temperature
- 4 – Mesto shranjene temperature
- 5 – Stanje baterije
- 6 – Zvok/brez zvoka
- 7 – Celsius/Fahrenheit merilna skala
- 8 – Izmerjena shranjena temperatura

#### UPORABA

Digitalni infrardeči termometer Infrahealth omogoča brezkontaktno merjenje telesne temperature.

Za delovanje potrebuje dve AAA bateriji, ki nista priloženi. Vstavite ju na hrbtno stran izdelka.

Telesno temperaturo merimo tako, da termometer usmerimo v čelo na razdalji med 3 in 5 centimetri in pridržimo tipko SCAN.

Vsaka izmerjena temperatura se samodejno shrani (glej sliko, št. 4). Za ogled predhodno izmerjenih temperatur pritisnite tipko + ali -.

S kratkim pritiskom tipke MODE preklopite med načinom merjenja površinske temperature in telesne temperature.

Termometer ima privzete nastavitve. Spreminjate jih lahko z uporabo funkcijskega menija:

Funkcija F1 - Menjava merilne skale: Za zamenjavo merilne skale pridržite tipko MODE za dve sekundi. Ko se prikaže napis F1 pritisnite + za merilno skalo Celsius oz. – za merilno skalo Fahrenheit.

Funkcija F2 - Opozorilna vrednost temperature: Privzeta nastavev za opozorilo je 38° C. Če želite to vrednost spremeniti pritisnite tipko MODE za dve sekundi. Ko se prikaže napis F1 zopet kratko pritisnite MODE. Ko se na zaslonu prikaže napis F2 s tipkami + in - spreminjate opozorilno vrednost temperature.

Funkcija F3 - Izravnava temperature: V kolikor merjenje odstopa od drugih merilnih naprav lahko s pomočjo te funkcije izravnate prikazano temperaturo. Z enakim postopkom se postavite na mesto F3 ter s tipkami + in – popravite vrednost v razponu od največ -3° C do 3° C.

Funkcija F4 – Izklop/vklop zvoka. Z enakim postopkom se postavite v meni F4, pri čemer nastavev On pomeni vklopljen zvok, Off pa izklopljen.

## POMEMBNO

- Pred uporabo poskrbite, da sta senzor in odprtina za sondo čista
- V kolikor želite uporabljati termometer v različnih temperaturah zraka (zunanji in notranji prostori) oz. so temperaturne razlike visoke, morate počakati do 30 minut vsakič, ko se zgodi menjava okolja
- V kolikor ste izmerili visoko temperaturo na predmetu počakajte do 30 minut, preden merite telesno temperaturo
- Za prave rezultate ne merite temperature po umivanju, rekreaciji in potenju, uporabi kozmetičnih izdelkov ipd.
- Temperaturo merite vsaj 30 minut po obroku, tuširanju ali telovadbi.
- Ta izdelek ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo
- Napravo čistite z suho krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih izdelkov
- Ne potopite v tekočino
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo
- Priporočeno je, da obe bateriji menjate hkrati
- Shranjujte v suhem prostoru brez prahu
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.